

On beat™

eccosur® 

Cada latido es único
Sabemos cómo interpretarlo

Holter HT 103™

Sistema de registro y análisis de ECG ambulatorio de 3 canales



1
Batería



24/48 hs
Registro



Adecuado
para niños




5/7
Electrodos



3
Canales

Holter HT 103™

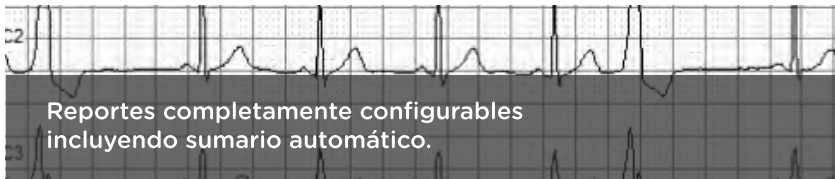

Reportes completamente configurables incluyendo sumario automático.



Adecuado para el uso en pacientes de peso inferior a 10 kg.



Descarga a través de memoria SD extraíble.

Hasta 48 hs de grabación con una sola pila AA alcalina o recargable.




85 x 75 x 20 mm.



100 g.



Exclusiva impresión de tiras de scan de hasta 60 minutos con eventos resaltados.

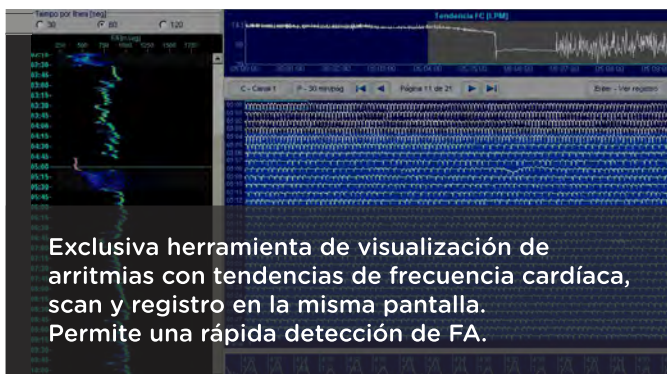

Exclusiva herramienta de visualización de arritmias con tendencias de frecuencia cardíaca, scan y registro en la misma pantalla. Permite una rápida detección de FA.



Servicio Posventa Especializado.

Actualizaciones gratuitas de Software.



Potente base de datos centralizada con varias estaciones de trabajo y unificada para todos los productos de Eccosur.

- Exportación en diferentes formatos con la posibilidad de procesar el estudio en otra PC facilitando la realización de interconsultas con colegas y/o telemedicina.
- Monitoreo online de la señal de ECG que permite verificar la correcta adquisición y evitar la repetición de estudios.
- Detección automática de eventos cardíacos, artefactos y arritmias en todos los canales.
- Potente herramienta de extracción de plantillas que facilita el diagnóstico y optimiza su tiempo.
- Análisis de VFC en el dominio temporal y frecuencial, discriminando períodos de actividad y reposo.
- Análisis de segmentos ST e intervalos QT. Tendencias de frecuencia cardíaca, ST, QT e intervalos RR.

CE
0434

ISO 9001:2008
ISO 13485:2012
BPF-ANMAT
Disp. 194/99

Producto autorizado por ANMAT
PM-1656-1

Validación ante el MIT y AHA
99.53% de Precisión.

Eccosur integra el Grupo SIREX, con más de 70 años de innovación y especialización en tecnología médica.

V3.0 Rev05/14